



## Обслуживание



# iCare

## Система для автоматической чистки и смазки наконечников

iCare - это новый стандарт для систем обслуживания наконечников. Стильный и компактный корпус обеспечивает простоту использования и multifunctionality для достижения тщательной очистки и смазки наконечников. Оптимальный объем подаваемого раствора установлен исходя из типа наконечника, обслуживание запускается одним нажатием кнопки. Система очистки цанги восстанавливает исходную чистоту цанги, а возможность выбора режима продувки позволяет вам изменять продолжительность продувки в зависимости от ситуации для проведения действительно качественного ухода. Благодаря стильному и компактному корпусу iCare легко разместить где угодно, что способствует эффективной организации рабочего пространства.

### Преимущества

- Объем масла предустановлен исходя из типа наконечника (высокоскоростной наконечник, низкоскоростной наконечник)
- Качественная очистка и смазка с простым управлением
- Функция очистки цанги гарантирует тщательную очистку и смазку цанги
- Режим продувки обеспечивает полное удаление остатков масла
- Встроенная большая ёмкость (1,2 литра) снижает необходимость частой доливки масла



## Оптимальный объем раствора исходя из типа наконечника

Оптимальный объем раствора предустановлен в зависимости от обслуживания высокоскоростного или низкоскоростного наконечника и гарантирует качественный уход при помощи одного нажатия на кнопку.




## Эргономичная и интуитивно-понятная большая панель управления

Запуск процесса смазки одним касанием.




## Высокоскоростные наконечники

iCare тщательно очищает и смазывает все детали наконечника, а также все каналы подачи воды и воздуха.

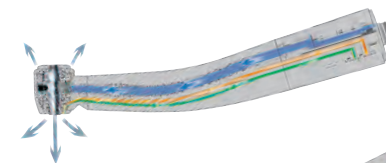

## Низкоскоростные наконечники

Низкоскоростные наконечники состоят из зубчатых механизмов, которым необходимо повышенное проникновение раствора. Поэтому порт системы iCare вращает зубчатый механизм внутри низкоскоростного наконечника, облегчая проникновение раствора ко всем внутренним деталям. В то же время загрязнения, находящиеся в каналах охлаждения и воздушных каналах, вымываются чистящим раствором.

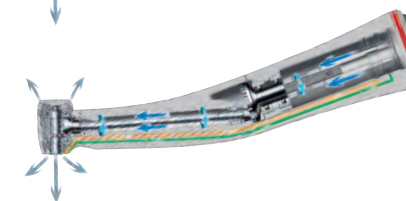

# iCare

## Выбор режима продувки

После смазки вы можете выбрать один из трёх режимов продувки, отличающихся длительностью.



## Функция очистки цанги

Функция очистки цанги позволяет полностью удалить грязь из цанги.




## Фильтр для головки наконечника предотвращает утечку раствора (опция)

Фильтр для головки наконечника предназначен для абсорбирования раствора.



## Простая очистка

Передняя крышка iCare полностью снимается, что позволяет быстро и легко очистить систему.

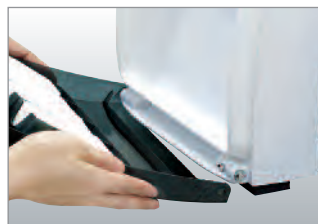

## Ёмкость для раствора

iCare имеет большую ёмкость для раствора объемом 1,2 литра, таким образом вы можете залить всю однолитровую канистру масла сразу, и вам не нужно будет часто доливать масло. Воронки, поставляемые в комплекте, позволяют просто и аккуратно залить масло в ёмкость.



## Подходит как для наконечников NSK, так и для наконечников других марок

Низкоскоростные наконечники NSK и других брендов напрямую подсоединяются к разъемам. Высокоскоростные наконечники NSK подсоединяются с помощью PTL-адаптера. Для большинства высокоскоростных наконечников других марок доступны специальные адаптеры.

## Безопасная работа благодаря функциям предупреждений

Сигнальный светодиод обеспечивает безопасную эксплуатацию, предупреждая вас о различных ситуациях, в том числе о недостаточном количестве масла и незапертой передней крышке.

## Стильный и компактный корпус

Для удобства эксплуатации компания NSK наделила систему iCare возможностью одновременной обработки до четырёх наконечников. Кроме того, дизайн корпуса iCare позволяет легко разместить систему где угодно, что способствует эффективной организации рабочего пространства.



## Комплекты iCare

Два стандартных порта + два порта вращения

МОДЕЛЬ iCare C2 Type (230V) КОД ЗАКАЗА Y1002787



Один стандартный порт + три порта вращения

МОДЕЛЬ iCare C3 Type (230V) КОД ЗАКАЗА Y1002788



Комплектация

- Блок iCare • Насадка для чистки цанги
- Кабель питания • Масло для техобслуживания (1 литр)
- Комплект масляных фильтров • Масляный абсорбер
- Воздушный шланг

Технические характеристики

• Питание	: AC 100-240В 50/60 Гц
• Давление воздуха	: 0,5 – 0,6 МПа (5,0-6,0 кгс/см <sup>2</sup> )
• Вес	: 6,5 кг (тип C2 / тип C3)
• Размеры	: Ш280 x Д240 x В350 (мм)
• Вместимость емкости для раствора:	1,2 л

- \* Подсоединение только к четырехканальному разъему Midwest
- \* Требуется подача воздуха (5,0-6,0 кгс/см<sup>2</sup>)



## Адаптеры iCare

МОДЕЛЬ PTL Adaptor	КОД ЗАКАЗА Z257010	• Для высокоскоростных наконечников NSK под разъем переходника PTL-CL-LED
МОДЕЛЬ B2/M4 Adaptor	КОД ЗАКАЗА T904	• Для высокоскоростных наконечников с 2-канальным разъемом Borden
МОДЕЛЬ KV Adaptor	КОД ЗАКАЗА Z257020	• Для высокоскоростных наконечников KaVo® под разъем переходника MULTIFlex® LUX
МОДЕЛЬ SR Adaptor	КОД ЗАКАЗА Z257023	• Для высокоскоростных наконечников Sirona® под разъем быстръемного переходника Sirona®
МОДЕЛЬ WH Adaptor	КОД ЗАКАЗА Z257021	• Для высокоскоростных наконечников W&H® под разъем быстръемного переходника Roto Quick
МОДЕЛЬ BA Adaptor	КОД ЗАКАЗА Z280022	• Для высокоскоростных наконечников Bien-Air® под разъем переходника Unifix®
МОДЕЛЬ F-Type Adaptor	КОД ЗАКАЗА Z280042	• Для головок к ENDO-MATE TC2 / DT / AT

- Проконсультируйтесь с дилером по вопросу наличия адаптеров для наконечников других производителей.

## Пополнение масла для техобслуживания

МОДЕЛЬ Maintenance Oil for iCare  
(1 канистра, 1 литр)

КОД ЗАКАЗА Z016130



МОДЕЛЬ Maintenance Oil for iCare  
(набор из 6 канистр)

КОД ЗАКАЗА Y1002783

МОДЕЛЬ Mist Filter Set

КОД ЗАКАЗА Y900159

- Набор: 12 шт. масляных фильтров



МОДЕЛЬ Oil Absorber Sheet

КОД ЗАКАЗА U433135

- Набор: 10 масляных абсорберов

